


S-WAVE 3D プリンター IMD-Sの ファームウェアアップデート手順について


- ◆ 松風バイオフィックス株式会社ホームページ (<http://www.shofubiofix.co.jp/>) よりファームウェアアップデート用のZipファイルをダウンロードし、デスクトップ上などに保存してから作業を開始してください。

1. ダウンロードしたファイルの展開

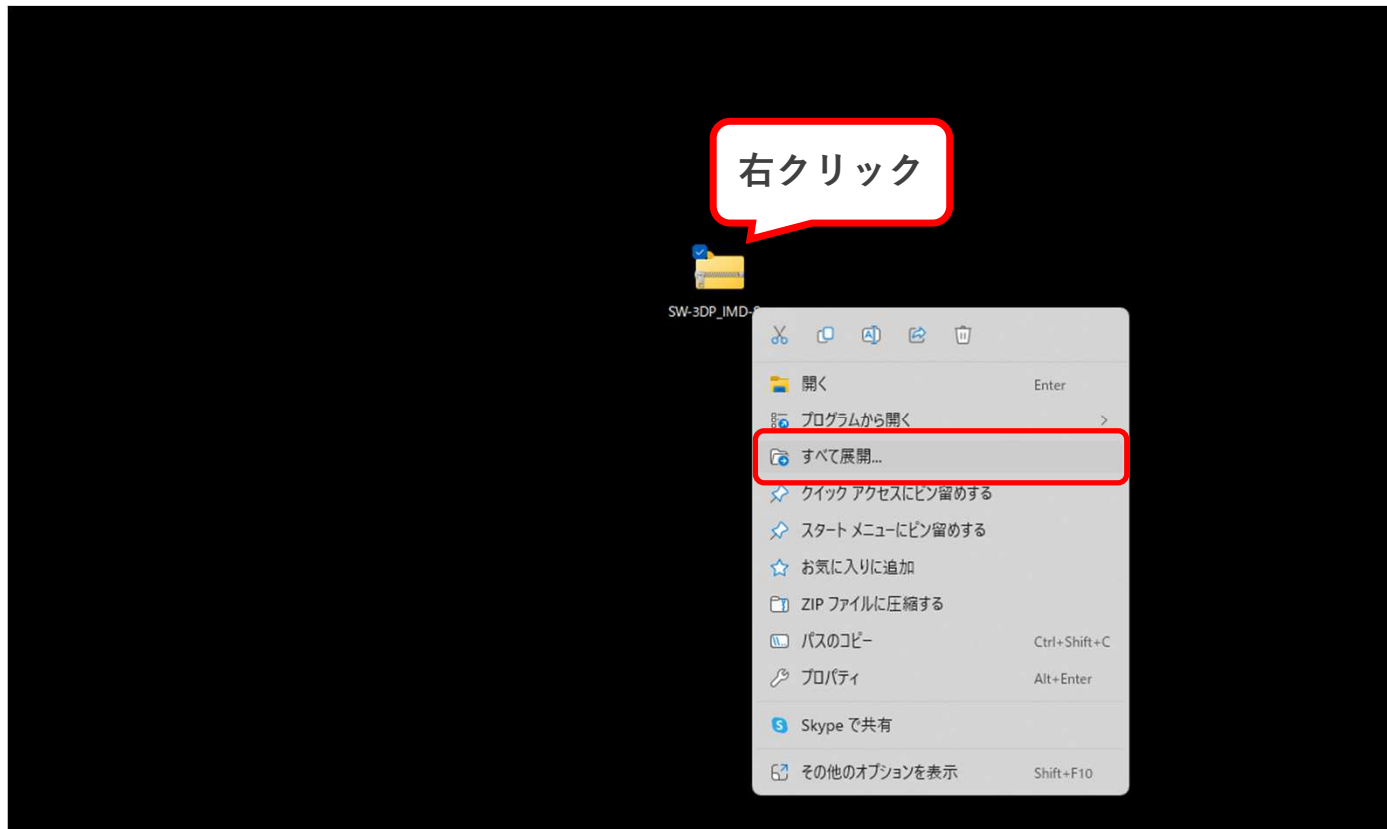


- ◆ ダウンロードしたZipファイル (SW-3DP_IMD-S_FW- (バージョン) .zip) を右クリックし、すべて展開を選択する。

2. アップデートファイルの確認①

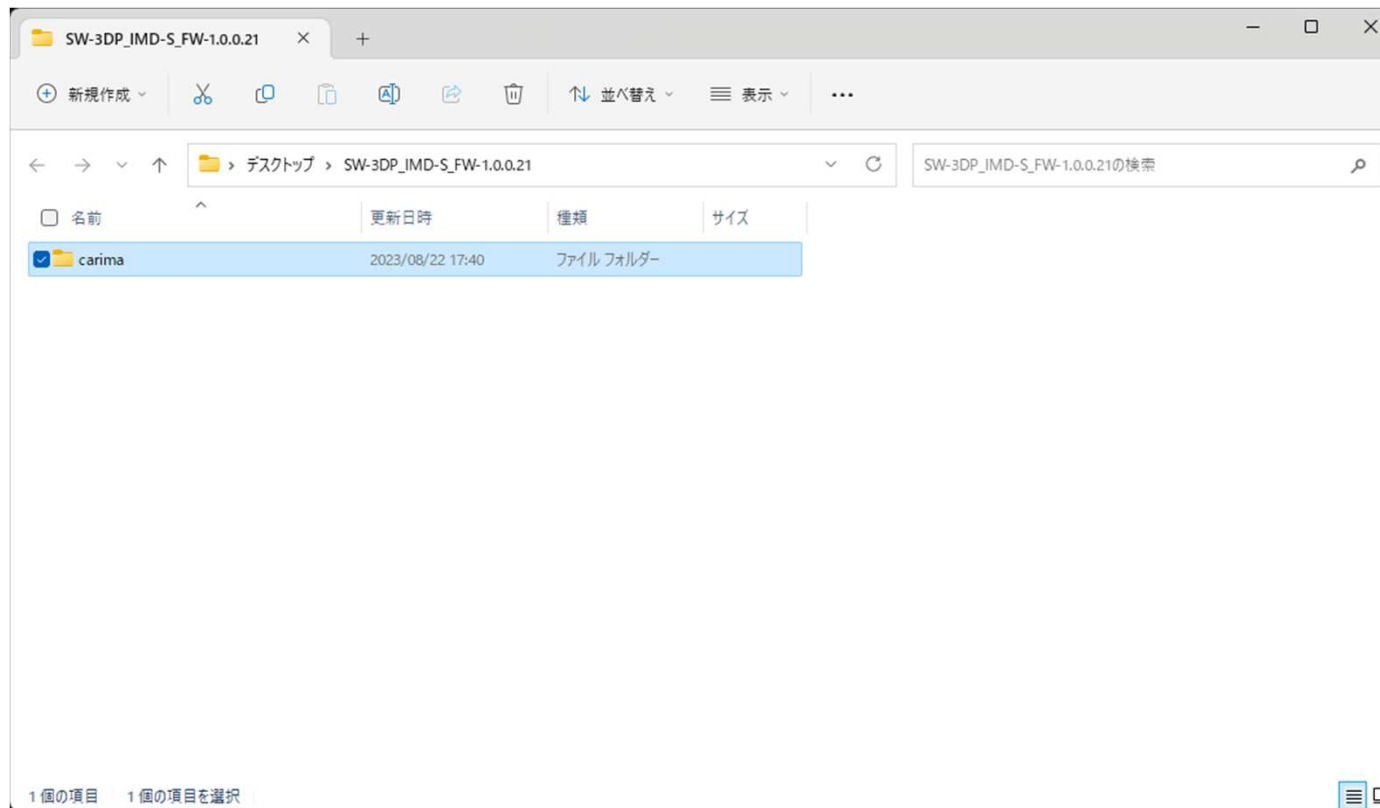


- ◆ 展開した「SW-3DP_IMD-S_FW- (バージョン)」フォルダに「carima」フォルダが格納されていることを確認する。

3. アップデートファイルの確認②

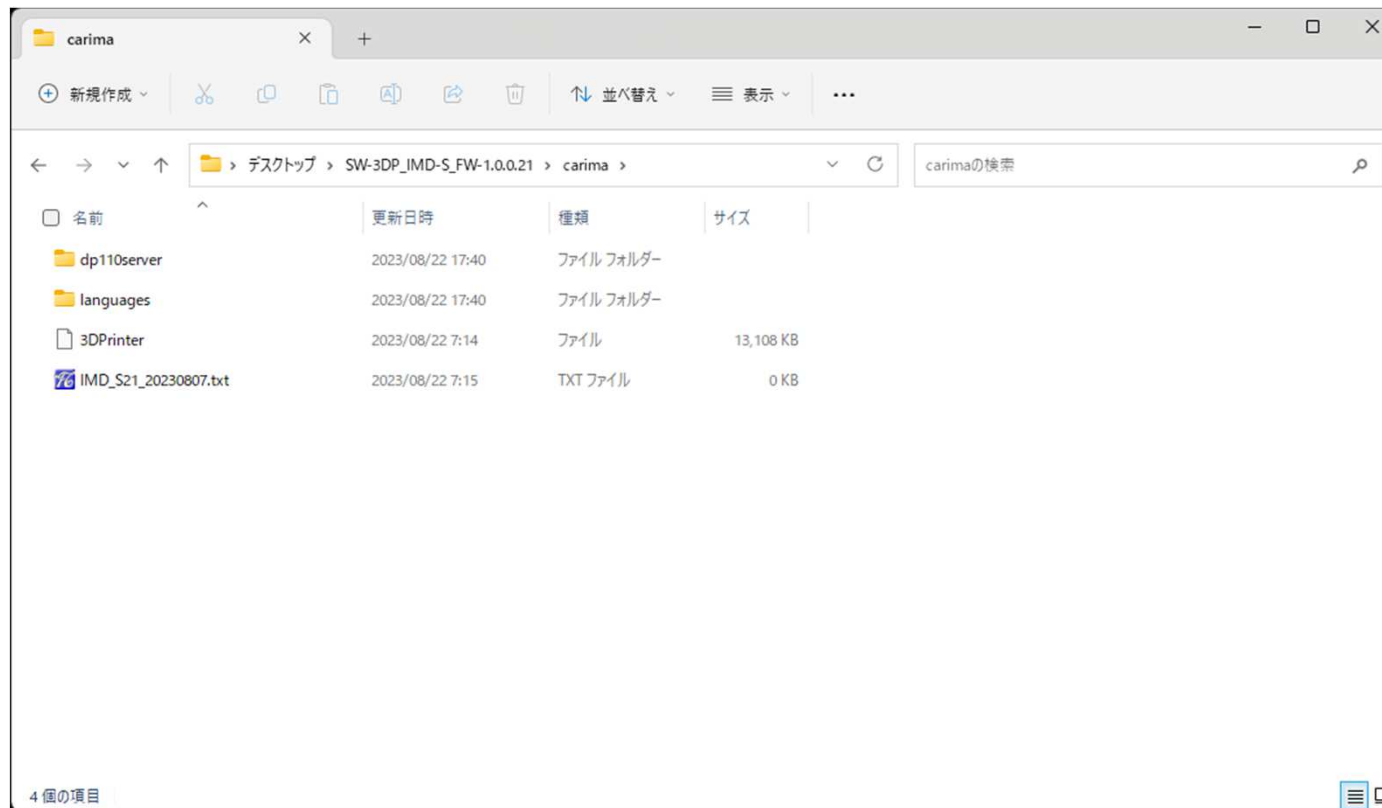

- ◆ 「carima」フォルダに4つのデータ（2ファイル・2フォルダ）が格納されていることを確認する。

4. アップデートファイルのUSBへの保存

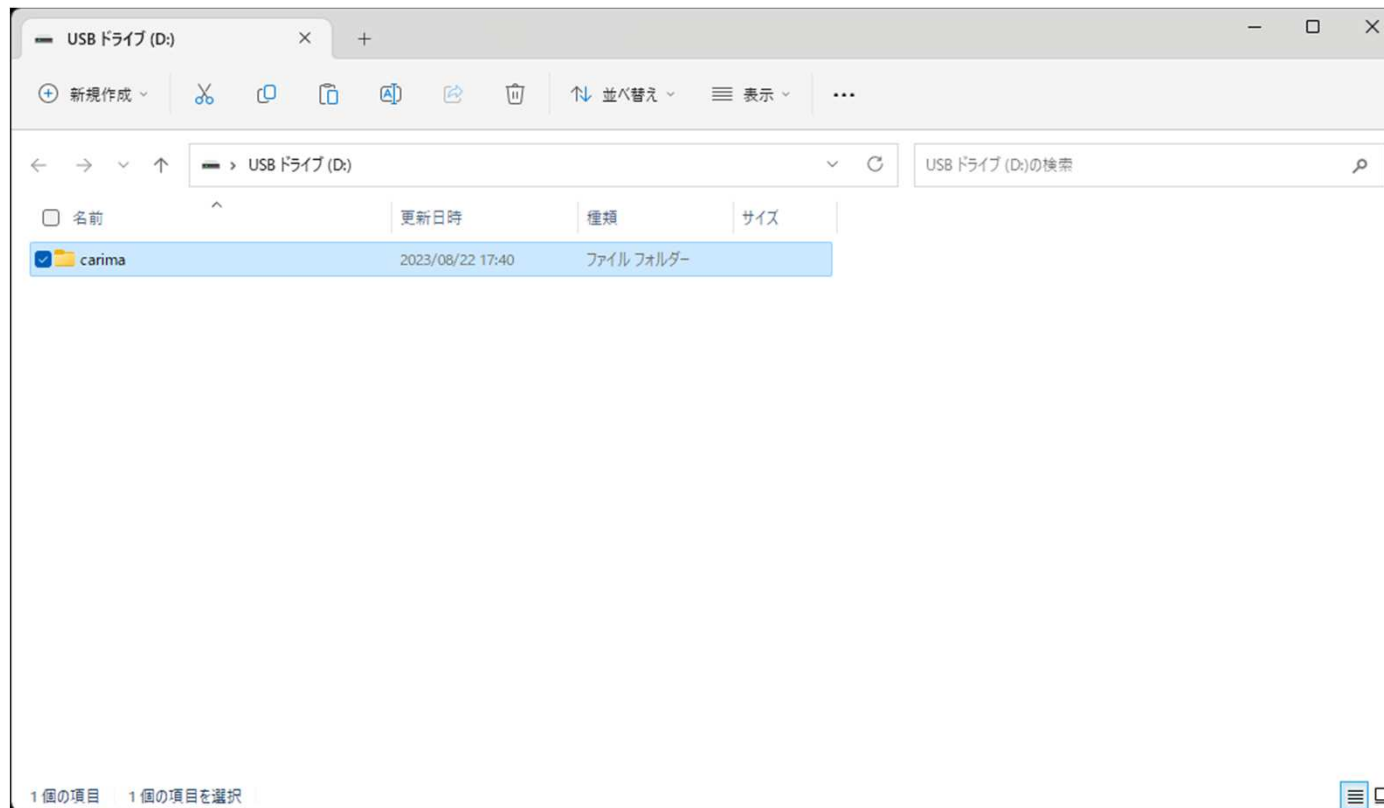





- ◆ パソコンにUSBメモリを挿入し、「carima」フォルダをUSBドライブ直下に保存する。
(USBメモリに他ファイルが保存されていても問題ございません。)

4. IMD-S本体アップデート作業の実施



5.19 ファームウェアのアップデート

※アップデートの案内等があった際のみ実行してください。

1. ホーム画面の「Printer Setting」をタッチします。
2. ファームウェアのアップデートファイルが保存されたUSBメモリをUSBポートに差し込みます。
3. 「Update」をタッチします。ファームウェアのアップデートが開始されます。アップデート作業中に自動的に再起動します。
4. 再起動したらUSBポートからUSBメモリを取り出し、ホーム画面の「Printer Setting」をタッチします。
5. 「Resin Initialization」をタッチします。最新の材料が登録されます。

21

- ◆ 「carima」フォルダを保存したUSBメモリをIMD-S本体のUSBポートに挿入し、取扱説明書「5.19ファームウェアのアップデート」に従い、アップデートを実施します。