




CAD/CAM冠専用トータルソフトウェア

松風 S-WAVE X(クロス)Designer



CAD/CAM冠専用
簡単×時短 CAD×CAM


S-WAVE
CROSS
X DESIGNER

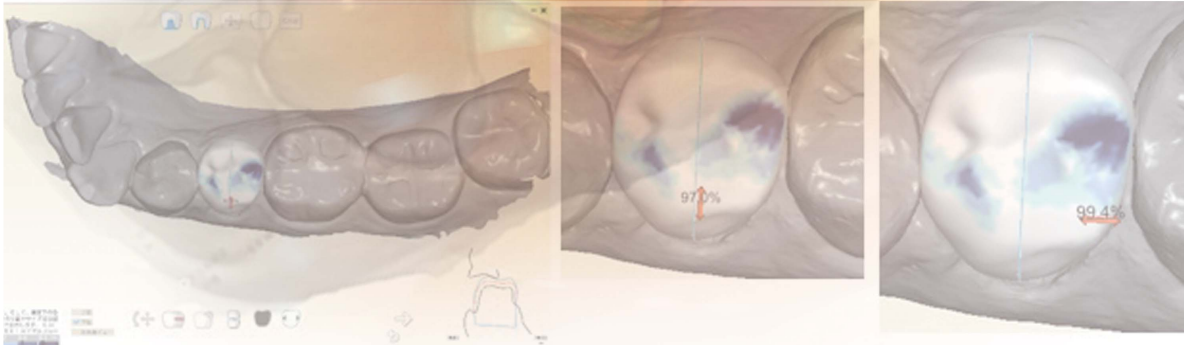


- 短時間設計
- シンプル操作
- CAD/CAM一体

SHOFU BIOFIX INC.


機能

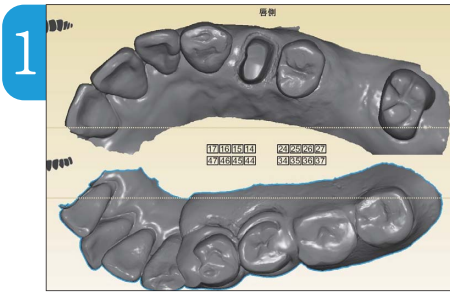


未分割模型のスキャンデータに対応。

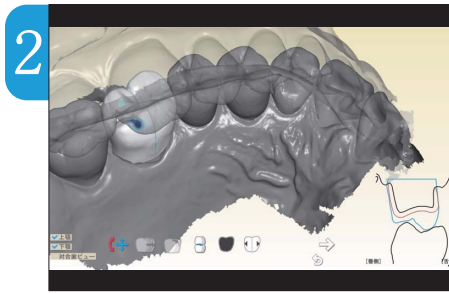


断面プロファイルの表示機能により設計状態を可視化。

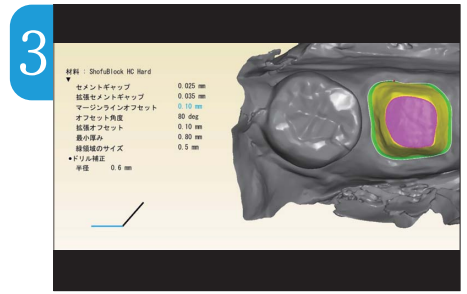


使用する材料毎に最適なセメントギャップをプリセット済み。任意設定も可能。

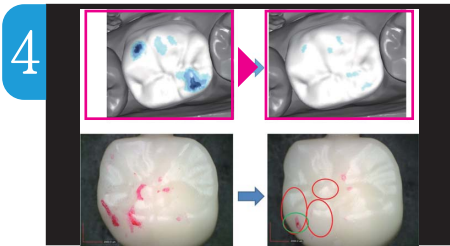


自動干渉部除去機能、簡易削合機能を搭載。

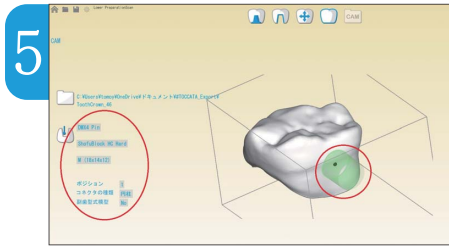

補綴物は最適な位置に自動配置。コネクタの位置、形状、太さを指定するだけの簡単操作。

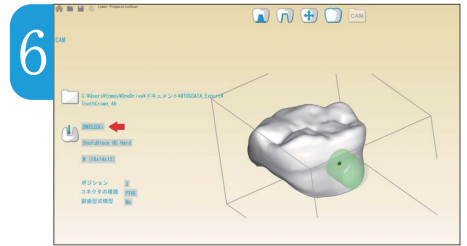

すべてのDGSHAPE社DWXシリーズに対応（ピン付き材料4軸加工のみ）。

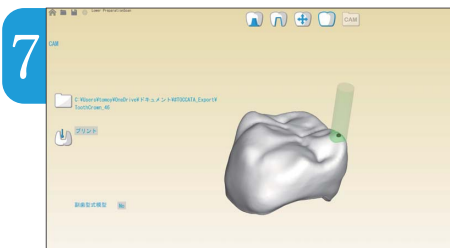

STLデータ（スプルーつき／スプルーなし）も出力可能。



副歯型式模型のSTLデータが出力可能。

【制限事項】

- 単冠のみに対応（連冠、ブリッジには非対応）
- トリミング模型はトリミング部をリリースしてください。
- 簡易削合機能は咬合運動を再現するものではありません。一定の位置で上下の干渉を検出し削合する機能です。

【PCの推奨スペック】

動作環境	推奨する仕様
CPU	インテル® Core i7 3.6GHz以上（推奨）
対応OS	Windows 10 Pro (64bit)
インストールに必要なストレージ容量	10GB以上（インストール容量900MB） システムドライブ SSD 250GB データ用 500GB以上
ディスプレイの解像度	1920×1080以上
グラフィックカード	NVIDIA社製のOpenGL2.0以上対応機種
マウス	3ボタンマウス（スクロールマウス推奨）

CAD/CAM冠専用トータルソフトウェア

松風S-WAVE X Designer

※本ソフトウェアは歯科技工士が使用するためのCAD/CAMソフトウェアです。

関連製品 ※松風ブロックHC、DWX-4、DentalPro Universal は株式会社 松風が販売する製品です



CAD/CAM用ハイブリッドレジンブロック
松風ブロック HC

【色調】11色 【適用】小白歯
【サイズ】S 5個入り
M 5個入り



CAD/CAM用ハイブリッドレジンブロック
松風ブロック HC ハードII

【色調】4色 【適用】小白歯
【サイズ】S 5個入り
M 5個入り
L 1個入り



CAD/CAM用ハイブリッドレジンブロック
松風ブロック HC スーパーハード

【色調】4色 【適用】大白歯
【サイズ】M 5個入り



CAD/CAM用ハイブリッドレジンブロック
松風ブロック HC ハード AN

【色調】4色 【適用】前歯
【サイズ】14L 5個入り



Medit i500
オーラルスキャナ
標準医院価格



デジタル用切削加工機
DWX-4



DWX用集塵機
DentalPro Universal

このカタログに記載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
このカタログに記載の価格は2021年3月現在の標準医院価格（消費税抜き）です。

取扱い店